

## About Attachment of the zoom head

For the installation dimensions when incorporating the zoom head into your system, refer to the following dimensions for the mounting stand; provide a boss hole ( $\Phi 20$ ), M6 Tap (3 locations), and the butting pin. Make sure that there is no space between the zoom head and the stand. Otherwise, dirt/dust or water may enter, and the product may be damaged.



The cover is provided on the back of the zoom head in order to prevent the static electricity. Do not remove the cover. Be careful not to touch the board.

Use the zoom head tilt within the range of  $\pm 90^\circ$ . Rotate the revolver in the upright position.


If the product is installed in your system, the manufacturer provides no guarantee of calibration or measurement accuracy. Make sure that the product with zoom head combined complies with regulations required by the location (country) where you use this product.

Considering the vertical movement range of the zoom head, leave a space of at least 285 mm above the center of the boss hole. (The zoom head will rise 53mm from the position where it was attached at initialization.)

(Unit: mm)  
The tolerance is a recommended value.

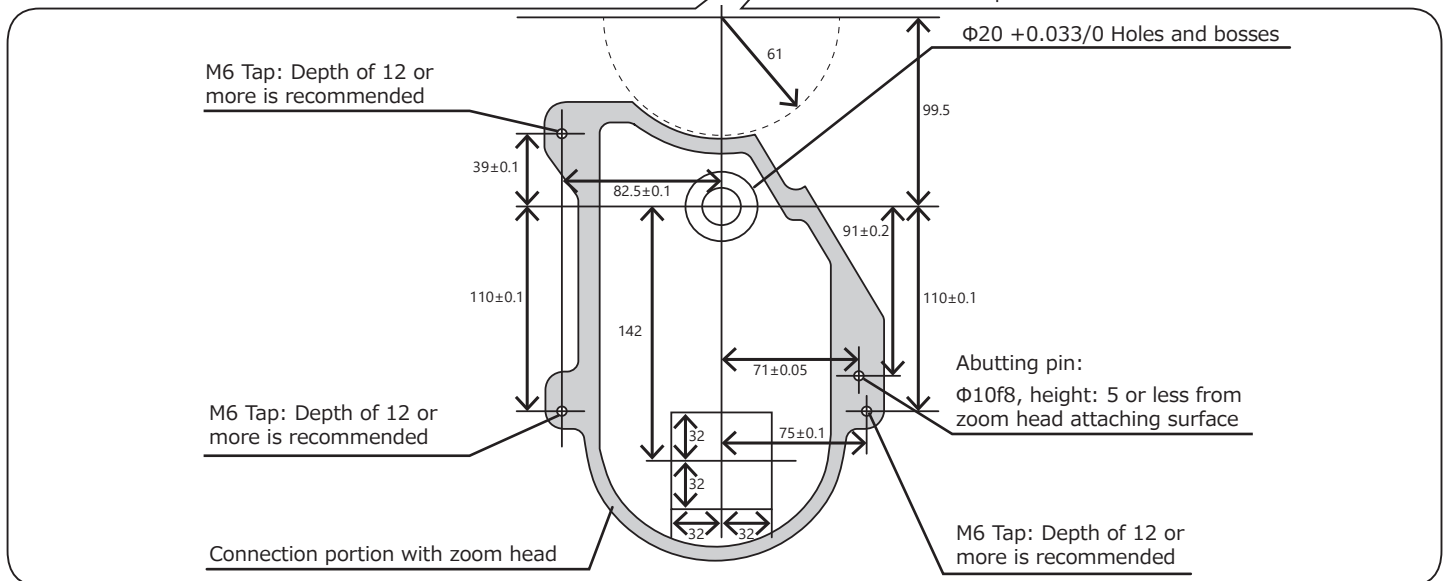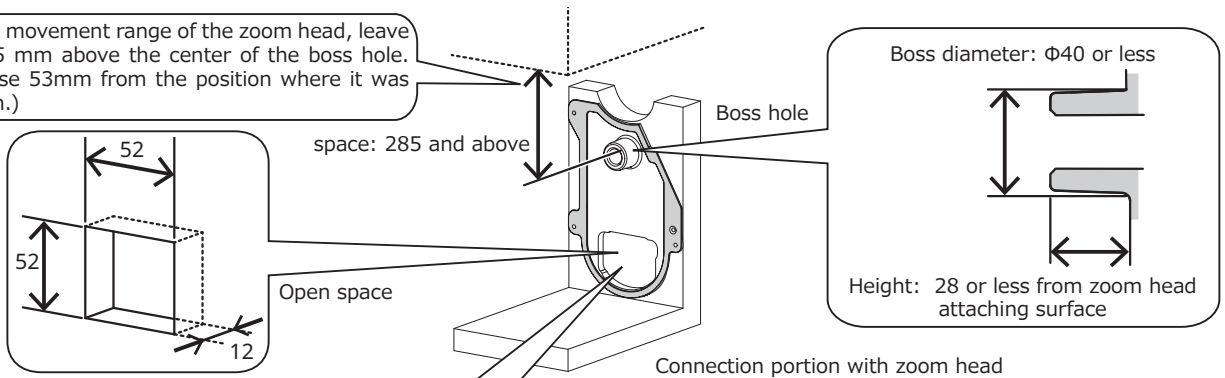

### Zoom head Range of motion

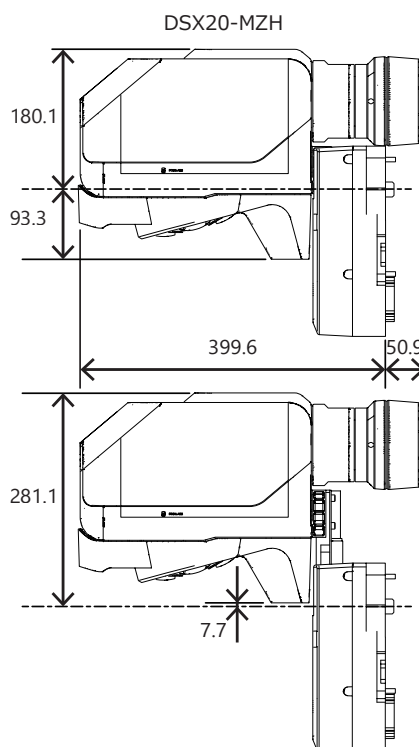

## Evident Corporation

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

## 株式会社エビデント

Evident Customer Information Center

**お客様相談センター**

受付時間 平日 9:00～17:00

**☎ 0120-58-0414**

※フリーダイヤルが利用できない場合

**03-6901-4200**

生物・工業用顕微鏡 E-mail: [ot-cic-microscope@evidentscientific.com](mailto:ot-cic-microscope@evidentscientific.com)

销售商名称 - 地址

## 仪景通光学科技（上海）有限公司

总部：中国（上海）自由贸易试验区日樱北路 199-9 号 102 及 302 部位

北京分公司：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 1 幢一层 102 室

售后服务热线：400-969-0456

### Life science solutions

ライフサイエンスソリューション

生命科学领域

Service Center / お問い合わせ / 服务中心



[https://www.olympus-lifescience.com/  
support/service/](https://www.olympus-lifescience.com/support/service/)

Official website / 公式サイト / 官网



<https://www.olympus-lifescience.com>

### Industrial solutions

産業ソリューション

工业领域

Service Center / お問い合わせ / 服务中心



[https://www.olympus-ims.com/  
service-and-support/service-centers/](https://www.olympus-ims.com/service-and-support/service-centers/)

Official website / 公式サイト / 官网



<https://www.olympus-ims.com>